

TEMPUR-MED® PRODUKTE FÜR OP-TISCHE UND ZUR PATIENTEN- LAGERUNG

www.tempurmed.de




 **TEMPUR-MED®**
DRUCKENTLASTENDE PRODUKTE

TEMPUR® MATERIAL



TEMPUR Sichert die Qualität

DRUCKWERTE BEI EINEM PATIENTEN (70 KG), DER AUF EINER TEMPUR AUFLAGE LIEGT.

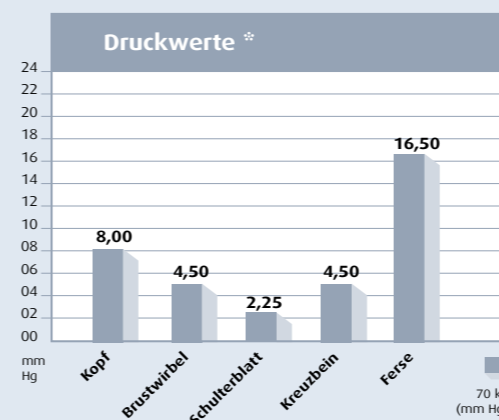

Das viskoelastische und thermoaktive Material sorgt für eine optimale Druckentlastung. Patienten, die auf einer TEMPUR-MED Auflage gelagert werden, sinken entsprechend der Körpertemperatur und des Körpergewichtes in das Material ein. Der Druck wird von der Matratze aufgenommen und verteilt sich gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche, wodurch sich das Risiko von Dekubitus reduziert.

PHYSIOLOGISCHE STABILITÄT DURCH EIGENE KÖRPERWÄRME

Forschungsergebnisse zeigen, dass ca. 70% aller chirurgischen Patienten an Hypothermie leiden.

Häufig sind höhere Pflegeaufwendungen und kostenintensive Betreuung die Folge. Das TEMPUR-Material speichert die Eigenwärme des Patienten. So wird, vor allem postoperativ, für eine ausreichende Körpertemperatur gesorgt, die u.a. für die Wirkung der Medikamente, für die Blutstillung und für eine effektive Herz-Kreislauffunktion wichtig ist.

PU-BEZUG

Alle TEMPUR-MED Produkte sind mit einem näsedichten und atmungsaktiven PU-Bezug ausgestattet. Der PU-Bezug ist verschweißt, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Er ist leicht zu wechseln, waschbar (95°C) und kann mit herkömmlichen, in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln, gereinigt und desinfiziert werden.

VORTEILE DES PU-BEZUGS:


- Hohe Elastizität
- Strapazierfähig
- Atmungsaktiv
- Desinfizierbar
- Autoklavierbar
- Hoher Hygienestandard
- Maschinenwaschbar bei 95°C
- Höchste Qualität



WAS IST TEMPUR?

Das TEMPUR Material ist ein viskoelastischer, thermoaktiver Polyurethanschaum mit einzigartigen, druckentlastenden Eigenschaften. Im Gegensatz zu herkömmlichem Schaumstoff, besteht das druckentlastende TEMPUR Material aus Millionen von viskoelastischen, kugelförmigen

Zellen. Es passt sich entsprechend der Körpertemperatur und des -gewichtes der Körperkontur des Patienten an und sorgt nachweislich für eine signifikante Druckreduzierung durch optimale Druckverteilung.

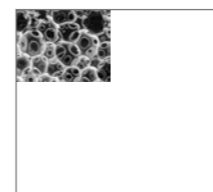

TEMPUR hat ein Raumgewicht von 85-110 kg/m³. Dank der offenen Zellstruktur kann die Luft zirkulieren.



TEMPUR ist ein offenzelliges, viskoelastisches und thermoaktives Material, das sich der Form des Körpers exakt anpasst.

PRODUKTPALETTE FÜR DEN OP-TISCH



OP-TISCHAUFLAGEN
DIE AUFLAGEN TRAGEN ZUR DEKUBITUS-PROPHYLAXE BEI.



EINTEILIG



DREITEILIG



FÜNFTTEILIG

TEMPUR-MED OP-TISCHAUFLAGEN

- Qualitätsprodukt zur Dekubitusprophylaxe
- In Standard- und Spezialgrößen erhältlich
- Geeignet für jedes Körpergewicht
- Auch für Kinder-OP-Tische erhältlich
- Verschweißte Nähte
- Farbe: Dunkelblau


TEMPUR-MED OP-LAGERUNGSSET FÜR OBERKÖRPERHOCHLAGERUNG (DREITEILIG)

Während einer Operation stellt die richtige Lage des Patienten im Hinblick auf Stabilisierung und Druckentlastung oft ein Problem dar, insbesondere, wenn der Patient auf der Seite liegt. Das TEMPUR-MED OP-Lagerungsset für die Seitenlagerung wurde entwickelt, um den Patienten in zahlreichen Positionen zu stabilisieren und den Körper – auch in Seitenlage – von Druck zu entlasten.



TEMPUR-MED OP-LAGERUNGSSET FÜR OBERKÖRPERHOCHLAGERUNG (VIERTEILIG)

Das TEMPUR-MED OP-Lagerungsset für die Seitenlagerung kann der Kompression von Venen und Nerven in Schultern und Armen vorbeugen. Aus der Rückenlage kann der Patient nach Narkoseeinleitung wieder auf die Seite gedreht werden, indem der obere Teil der Auflage entfernt wird.

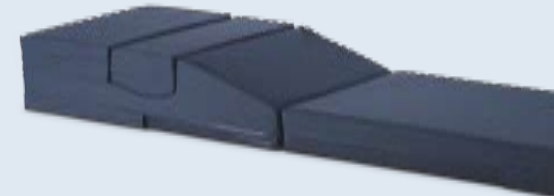

TEMPUR-MED OP-ARMAUFLAGE

Leicht bogenförmig geformt zur Stabilisierung des Armes.

Größe: 18 x 60,5 x 8 cm



TEMPUR-MED OP-KOPFKISSEN

Zur optimalen Positionierung des Kopfes vor, während und nach einer Operation auf dem OP-Tisch.

Größe: 25 x 31 x 10/7 cm



TEMPUR-MED OP-INTUBATIONSKISSEN

Das Kissen sorgt für eine anatomisch richtige Lage und eignet sich für die Intubation des Patienten.

Größe: 30 x 25 x 10/5,5 cm

OP-LAGERUNGSPRODUKTE



TEMPUR-MED OP-UNIVERSALKISSEN

TEMPUR-MED Universalkissen eignen sich sehr gut zur Patientenlagerung während oder nach einer Operation. Ideal unter Nacken, Armen, Knien und Füßen. PU-Bezug wahlweise in dunkelblau oder weiß.

Größe: 50 x 20 x 10 cm
Größe: 35 x 20 x 10 cm



TEMPUR-MED LAGERUNGSRÖLLE

TEMPUR-MED Rollen eignen sich sehr gut zur Patientenumlagerung. Für eine bequeme stabile Lage während oder nach einer Operation oder zur therapeutischen Behandlung im Bett. Ideal unter Knien und Füßen.

Größe: Ø15 x 40 cm
Größe: Ø10 x 40 cm



TEMPUR-MED OP-LAGERUNGSKEIL

Der TEMPUR-MED Lagerungskeil sorgt bei Operationen in Seitenlage für eine stabile Lagerung von Rücken und Bauch.

Größe: 45 x 15 x 9 cm
Größe: 35 x 15 x 9 cm



TEMPUR-MED OP-KNIE-UND FERSENKISSEN (2-TEILIG GETRENNT)

Das TEMPUR-MED Knie- und Fersenkissen kann zur stabilen Entlastung unter Arme und Beine geschoben werden. Es kann auch zwischen die Beine gelegt werden.

Größe: 27 x 20 x 10 cm



TEMPUR-MED KNIE- UND FERSENKISSEN (OFFEN/GESCHLOSSEN)

Das TEMPUR-MED Knie und Fersenkissen (offen oder geschlossen) wird zur stabilen Entlastung unter Arme und Beine geschoben. Es kann auch in der Seitenlage zwischen die Beine geschoben werden.

Größe: 27 x 20 x 20 cm (geschlossen)
Größe: 54 x 20 x 10 cm (offen)



TEMPUR-MED OP-VENENKISSEN

Das TEMPUR-MED OP-Venenkissen bietet druckentlastenden, gewebeschonenden Lagerungskomfort bei Stauungen, Krampfadern, Venenbeschwerden, Überlastungen und Schwellungen. Durch die entspannende, druckentlastende Weichlagerung können sowohl die Blutzirkulation als auch die Mikrozirkulation der Gewebeflüssigkeiten erheblich verbessert werden.

Größe: 50 x 75 x 15/0 cm



TEMPUR-MED MERKMALE

- Ideal für das druckentlastende Lagern
- Verschweißte, maschinenwaschbare (95°) Bezüge
- Rutschfester PU-Bezug (Non-Slip) bei OP-Tischauflagen
- Kein Wegrutschen der OP-Lagerungskissen
- Kein Eindringen von Feuchtigkeit
- Leichtes, gut transportierbares Material
- Keine Wartung notwendig
- Hohes Maß an Sicherheit
- Einfache Handhabung
- Ermöglicht gut kalkulierbare Finanzplanung
- Kosteneffizient
- Geeignet für jedes Körpergewicht
- Lange Lebensdauer
- 3-Jahre Garantie auf OP-Lagerungskissen
- 7-Jahre Garantie auf OP-Tischauflagen (pro rata*)

* Pro rata

0-3 Jahre: Volle Garantie
3-4 Jahre: Die Garantieleistung reduziert sich um 10%.
4-5 Jahre: Die Garantieleistung reduziert sich um 30%.
5-6 Jahre: Die Garantieleistung reduziert sich um 60%.
6-7 Jahre: Die Garantieleistung reduziert sich um 80%.
Mehr als 7 Jahre: Keine Garantie

WWW.TEMPURMED.DE



THE ONLY MATTRESS AND
PILLOW RECOGNIZED BY
NASA AND CERTIFIED BY
THE SPACE FOUNDATION

TEMPUR – DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Tempur-Pedic International, Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Schwerpunkt Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Produkten aus dem einzigartigen TEMPUR Material. TEMPUR ist ein viskoelastisches Hightech-Material, das ursprünglich in den 70er Jahren von der NASA für das US-amerikanische Raumfahrtprogramm entwickelt wurde. Ende der 80er Jahre erwarb TEMPUR die Herstellungsrechte für das Material und zu Beginn der 90er Jahre gelang es unseren Ingenieuren, einen Produktionsprozess für das TEMPUR Material zu entwickeln. Dadurch fand die Technologie der NASA Einzug in private Haushalte und das Gesundheitswesen der ganzen Welt.

TEMPUR Produkte für das Gesundheitswesen tragen den internationalen Namen: TEMPUR-MED.



TEMPUR-Produkte tragen das CE-Zeichen für Medizinprodukte (Klasse 1), was bedeutet, dass die Eigenschaften des Produkts den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entsprechen.



DRUCKENTLASTENDE PRODUKTE

TEMPUR DEUTSCHLAND GMBH
Carl-Benz-Str. 8
D-33803 Steinhagen
Telefon: (+49) 5204 1000 50
Fax: (+49) 5204 1000 551
info@tempurmed.de
www.tempurmed.de