









Hernien
Bauchwandhernie / Nabelhernie
extraperitoneal

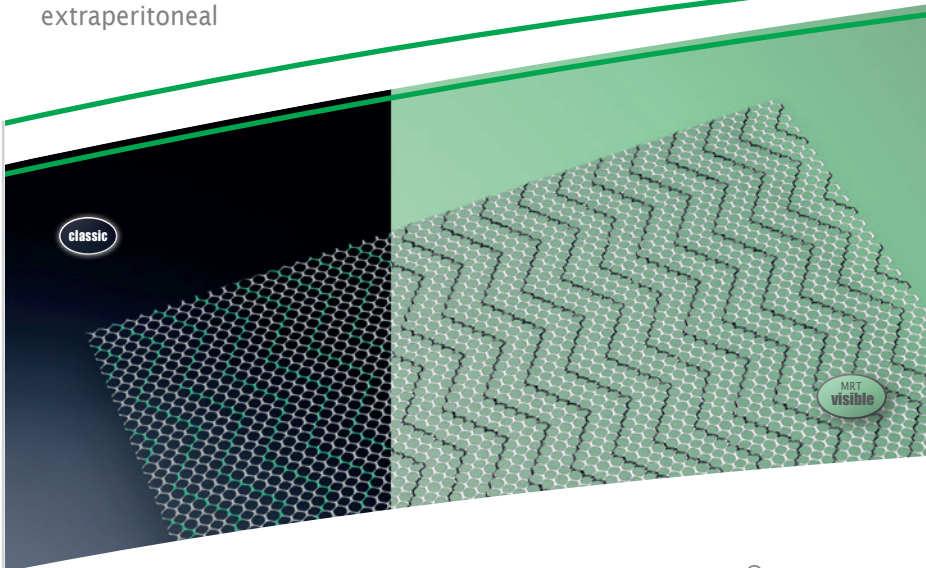

DynaMesh®-CICAT Implantate sind zur Weichgewebeerstärkung und Weichgewebeüberbrückung der fasziellen und bindegewebigen Strukturen der Bauchwand im Rahmen der chirurgischen Behandlung von epigastrischen Hernien, Nabel- oder Narbenhernien, sowie im Rahmen der Prävention von Narbenhernien konzipiert.





DynaMesh®-CICAT

Bauchwandhernie		Empfohlene Größen für die chirurgische Behandlung von Bauchwandhernien. Bei Auswahl der Netzgröße die ausreichende Überlappung beachten! ^(P) Prophylaxe		
DynaMesh®-CICAT		d 10 cm rund	REF 2610090010	VE = 3 Stück
		10 cm x 10 cm	REF 2610091010	VE = 3 Stück
		15 cm x 15 cm	REF 2613091515	VE = 3 Stück
DynaMesh®-CICAT		longitudinal		
		10 cm x 35 cm ^(P)	REF 2610091035	VE = 2 Stück
		15 cm x 25 cm	REF 2610091525	VE = 2 Stück
			REF 2615091525	VE = 5 Stück
		15 cm x 30 cm	REF 2610091530	VE = 2 Stück
			REF 2615091530	VE = 5 Stück
		18 cm x 40 cm	REF 2610091840	VE = 2 Stück
		20 cm x 30 cm	REF 2610092030	VE = 2 Stück
			REF 2615092030	VE = 5 Stück
DynaMesh®-CICAT		transversal		
		40 cm x 20 cm	REF 2610094020	VE = 1 Stück
DynaMesh®-CICAT visible		20 cm x 30 cm	REF 2611162030	VE = 1 Stück
		45 cm x 60 cm	REF 2611164560	VE = 1 Stück
Nabelhernie		Empfohlene Größen für die chirurgische Behandlung von Nabelhernien. Bei Auswahl der Netzgröße die ausreichende Überlappung beachten!		
DynaMesh®-CICAT		05 cm x 06 cm	REF 2610090057	VE = 5 Stück
		d 10 cm rund	REF 2610090010	VE = 3 Stück
		10 cm x 10 cm	REF 2610091010	VE = 3 Stück
		15 cm x 15 cm	REF 2613091515	VE = 3 Stück
DynaMesh®-CICAT visible		05 cm x 06 cm	REF 2610090059	VE = 5 Stück

Anwendung und Eigenschaften

Produkt	DynaMesh®-CICAT	DynaMesh®-CICAT visible
Einsatzgebiet	Bauchwandhernie / Nabelhernie	
Chirurgischer Zugang	offen / mini-open / endoskopisch / laparoskopisch	
OP-Technik	alle gängigen extraperitonealen OP-Techniken	
Netzlage	extraperitoneal (onlay, sublay und/oder präperitoneal)	
Fixation	ohne / Naht / Kleber	
Grüne Linienmarkierung		●
Visible Technologie	●	●
Polymer (Monofilament)		PVDF
Biokompatibilität		●
Alterungsbeständigkeit		●
Dynamometrie		●
Weiterreißfestigkeit		●
Keine Narbenplattenbildung		●
Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8])		1 a

DynaMesh®-CICAT Implantate sind extraperitoneal in onlay, sublay und/oder präperitonealer Netzlage zu platzieren.

VI008xx	DynaMesh®-CICAT - Animation: Retromuscular Alloplasty - Incisional Hernia Repair https://youtu.be/nblVihyHk88	
VI002en	DynaMesh®-CICAT - Animation: Umbilical Hernia Repair in PUMP Technique https://youtu.be/Y2vpHWPqEQc	
VI002de	DynaMesh®-CICAT - Animation: Reparation der Nabelhernie in der PUMP Technik https://youtu.be/GZIDqDtNB8U	
VI009xx	DynaMesh®-CICAT - Animation: MILOS Technique https://youtu.be/XnVFjg8S9cl	

● trifft für alle Produktgrößen zu
● trifft nicht zu

Vertrieb durch: **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH
Alles Gute fürs Krankenhaus
Emil-Hoffmann-Straße 53
D-50996 Köln, Germany
Tel.: +49 (0) 2236 - 39 13-0
Fax: +49 (0) 2236 - 39 13-109
www.dahlhausen.de
info@dahlhausen.de

Eindeutige Anwendung

	Bauchwandhernie			Nabelhernie	
	longitudinal	transversal		sublay	subfaszial
Reparation					
Prophylaxe (P)			—	—	—

Sicherheit für die Positionierung

Voraussetzung für einen dauerhaften OP-Erfolg: Das Implantat muss korrekt positioniert werden.
Hierzu sind die Implantate mit **grünen Orientierungstreifen** versehen. Sie müssen immer **cranio-caudal** verlaufen.

Sicherheit für die Platzierung

Die **Antislip-Oberfläche** sorgt für eine positionsstabile Netzplatzierung. Zudem erleichtert sie Handling und Fixation.
Die hohe effektive Porosität erlaubt den direkten Kontakt der Gewebeschichten durch das Netz hindurch und unterstützt die schnelle Inkorporation.

Vorsicht: DynaMesh®-CICAT darf nicht intraperitoneal platziert werden!

Vertrieb durch: **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH
Alles Gute fürs Krankenhaus
Emil-Hoffmann-Straße 53
D-50996 Köln, Germany
Tel.: +49 (0) 2236 - 39 13-0
Fax: +49 (0) 2236 - 39 13-109
www.dahlhausen.de
info@dahlhausen.de